


CUSTO-X[®]

SKIN TECHNOLOGY

Smart 3.0 Dermografo



Compatibilità Aghi

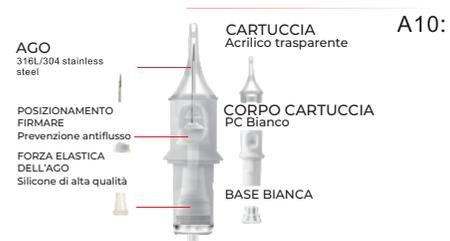

A7:



MISURA	FORMA	DIAMETRO AGO
1P	•	0.18/0.20/0.30/0.35/0.45MM*1 Prong Round
2P	••	0.3MM*2Prong Round
3P	•••	0.3MM*3Prong Round
5P	••••	0.3MM*5Prong Round
3FP	•••	0.3MM*3Prong Flat
5FP	••••	0.3MM*5Prong Flat
7FP	•••••	0.3MM*7Prong Flat
10U	⊙	0.2MM*10Prong U Shape
12P	••••••	0.25MM*12Prong
Nano	⊙	Square Nano

A10:

MISURA	SHAPE	NEEDLE WIRE DIAMETER
1RL	•	0.18/0.25/0.3/0.35/0.45MM X1Round Liner
3RL	•••	0.3MM X3Round Liner
5RL	••••	0.3MM X5Round Liner
5RS	••••	0.3MM X5Round Shader
7RS	•••••	0.3MM X7Round Shader
9RS	••••••	0.3MM X9 Round Shader
7RM		0.3MM X7U Round Magnum
9RM		0.3MM X9U Round Magnum
5F	••••	0.3MM X5Round Liner
7F	•••••	0.3MM X7Round Liner
9F	••••••	0.3MM X9Round Liner
SMP	•	0.3MM X1Round Shader
12P	••••••	0.3MM X12Round Shader
Round Nano	⊙	0.3MM X Round Shader
Round Nano	⊙	0.3MM X100 Round Magnum
7M1		0.3MM X7 Liner Magnum
9M1		0.3MM X9 Liner Magnum
5M1		0.3MM X5 Liner Magnum

DERMOGRAFO

I suddetti prodotti soddisfano pienamente tutti i requisiti della Direttiva EMC 2014/30/EU con i relativi standard e specifiche pubblicate nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

Test EMC:

EN 55032:2015
EN 6100032:2014
EN 6100033:2013
EN 55035:2017

CERTIFICATO N°: BKC180700949C

Ente che ha effettuato i Test: SHENZHEN BKC TESTING CO., LTD.



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano.

Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione Europea e i regolamenti successivi.


Questo apparecchio è per uso interno.

Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

Questo apparecchio rispetta le direttive BKC 180700949C dell'Unione Europea e i regolamenti successivi.



STRUTTURA

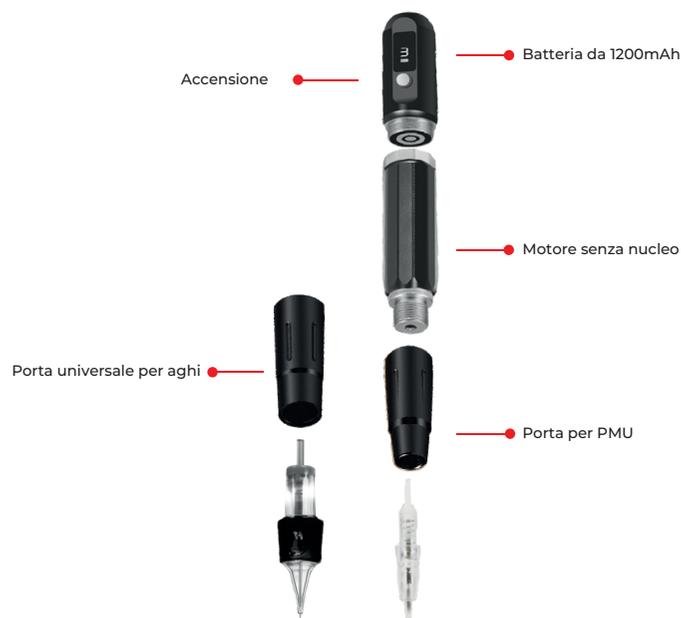

SPECIFICHE

Modello	Smart 3.0
Voltaggio	100-240V,50-60HZ
Voltaggio in uscita	5V 2A
Lunghezza aggiustamento ago	0-3MM
Livelli di velocità	1-5
Durata batteria	3 ore
Peso	240g
Utilizzo	PMU: Sopracciglia, eyeliner e labbra. Microneedling e Nanopeeling

Informazioni generali


1. Wireless: Funzionamento a batteria, viene venduto con una batteria di riserva
2. Compatibile con aghi PMU e universali.
3. Motore senza nucleo.
4. Interruttore sicuro contro il click non intenzionale.
5. Silenziosa.
6. L'ago è semplice da inserire e regolare
7. La cartuccia per gli aghi è sterilizzata
8. **Tenere in carica per almeno 6 ore prima del primo utilizzo**

Istruzioni per l'utilizzo

1. Inserire l'ago sulla penna
2. Ruotare l'ago ed aggiustare la lunghezza.
3. Premere ON/OFF per accendere o spegnere la penna
4. Premere il tasto per scegliere la velocità desiderata
5. Premere ON/OFF per accendere o spegnere la penna

Assemblaggio

- 1a. Inserire l'ago universale
- 1b. Inserire l'ago da PMU
2. ruotare per inserirlo

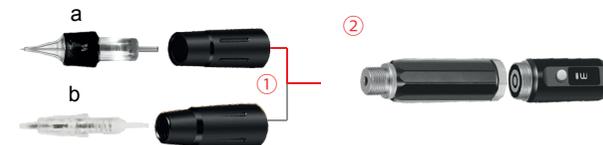

Usò wireless, non è necessario il cavo per il corretto funzionamento. Nel caso in cui la batteria si scarichi è comunque possibile utilizzarla collegata al cavo di alimentazione.



Attenzione

1. Non far cadere il macchinario
2. Per utilizzare il prodotto oltre le 2 ore spegnere il prodotto ogni 10 minuti.
3. Stringere l'ago dopo l'installazione per evitare che si sfili durante il trattamento
4. Non bagnare il prodotto o le mani durante l'utilizzo.
5. Non disassemblare il prodotto
6. Il prodotto deve essere tenuto in un luogo asciutto.
7. Durante l'inserimento dell'ago, se è lungo 3mm, ruotarlo anche nella direzione opposta.

ATTENZIONE: Tenere lontano da fuoco o fonti di calore intenso